

INSTRUCTIONS FOR USE

RECTAL CATHETER

Materials Used

- Poly Vinyl Chloride (PVC)

Indications

- To clear the secretion from the rectum
- Introduction of enema

Contraindications

- Not to be used in patients with known hypersensitivity to any of the materials used

Directions for Use

- Clean the anus of the patient with mild antiseptic solution
- Put some antiseptic jelly on the tip of the catheter without touching the tip of the catheter
- Advance the catheter into the rectum
- Once the catheter is inserted, collect the secretion into a suitable container

Cautions


- Do not use if package is opened or damaged
- Aseptic techniques should be followed
- The product should be used only by qualified healthcare professionals
- Not to be used for treatment of Children and Pregnant or nursing women.
- Do not re-sterilize. Discard the set after single use
- Reuse and cleaning of product may alter their structural and mechanical properties. It may lead to infection or other illness/injury
- The product should be replaced and disposed of as per facility approved protocol or CDC guidelines
- Store in between 5°C to 35°C, avoid excessive heat, protect from direct sunlight and moisture
- Poly Medicure Limited will not be responsible for any direct incidental or consequential damages resulting from reuse of product



Distribué par / Distributed by :
PETERS SURGICAL
Immeuble AURELIUM - 1 cours de l'Île Seguin
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FRANCE
www.peters-surgical.com

POLY MEDICURE LIMITED
Plot No. 104-105, Sector 59, HSIIDC Indl. Area,
Ballabgarh, Faridabad-121004 (Haryana), INDIA

EC REP Obelis s.a.,
Boulevard Général Wahis 53,
1030, Brussels, BELGIUM.
Tel : +(32) 2. 732.59.54
E-mail : mail@obelis.net

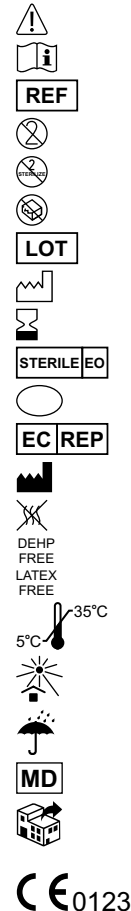

Cautions

- Consult Instructions for use
- Catalogue reference
- For single use only
- Do not Resterilize
- Do not use if packaging or product has been damaged or contaminated
- Batch Number
- Date of Manufacturing
- Use by / Expiry date
- Sterilised by Ethylene Oxide
- Single Sterile Barrier System
- European Authorised Representative
- Manufactured by
- Pyrogen Free
- DEHP FREE
- LATEX FREE
- Temperature Limit
- Keep Away from Sunlight
- Keep Dry
- Medical device
- Entity distributing the Medical Devices into EU
- CE marking: The product is in conformance with the basic requirements of European Directive 93/42/EEC concerning Medical Devices

Rev. 03-21/08

Note : IFU will be put inside the duplex box

Doc. No. Peters Surgical	Date : 08-11-19	Design by	Checked by	Approved by
IFU Design for Rectal Catheter Front Side	Size : 180x130mm P. Area :			
Color Break Black	Specifications : 1. 2.	Designer Issue No. 04	QA Person Scale : 1:1	QA Incharge Sheet 1 of 1
Rev.	Amendment		Remarks	Date of Amdt.
1.	Updated the cautions and form of CE symbol			02-12-19
2.	Updated new CE 0123			21-05-20
3.	Added Peter's new logo & address, MD symbol & DEHP Free			27-08-21
4.				

NOTICE D'INSTRUCTIONS

SONDE RECTALE

Matériaux

- Polychlorure de vinyle (PVC)

Indications

- Évacuation des sécrétions rectales
- Lavement

Contre-indications

- Ne pas utiliser sur des patients hypersensibles aux matériaux entrant dans la composition de ce produit

Mode d'emploi

- Nettoyer l'anus du patient à l'aide d'une solution antiseptique douce
- Appliquer un peu de gel antiseptique au bout de la sonde sans le toucher
- Introduire la sonde dans le rectum
- Une fois la sonde en place, recueillir les sécrétions dans le contenant approprié

Attention

- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Les règles d'asepsie doivent être suivies
- Ce produit doit uniquement être utilisé par des professionnels de la santé
- Ne pas utiliser pour le traitement des enfants, des femmes enceintes ou allaitantes
- Ne pas re-stériliser. Jeter le matériel après un usage unique
- Le nettoyage et la réutilisation du produit risque d'altérer ses propriétés structurales et mécaniques. Cela pourrait entraîner une infection ou d'autres maladies/traumatismes
- Ce produit doit être remplacé ou jeté selon le protocole défini par chaque centre de soins ou selon les directives sanitaires en vigueur
- Conserver entre 5°C et 35°C, éviter les chaleurs extrêmes, conserver à l'abri de la lumière du soleil et de l'humidité
- L'entreprise Poly Medicure Limited ne pourra être tenue responsable des dommages accessoires ou indirects résultant de la réutilisation de ce produit


Distribué par / Distributed by :
PETERS SURGICAL
Immeuble AURELIUM - 1 cours de l'Île Seguin
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FRANCE
www.peters-surgical.com


 **POLY MEDICURE LIMITED**
Plot No. 104-105, Sector 59, HSIIDC Indl. Area,
Ballabgarh, Faridabad-121004 (Haryana), INDIA

EC REP Obelis s.a.,
Boulevard Général Wahis 53,
1030, Brussels, BELGIUM.
Tel : +(32) 2. 732.59.54
E-mail : mail@obelis.net

	Attention
	Consulter les précautions d'emploi
REF	Référence du produit/Code de l'article
	Ne pas réutiliser
	Ne pas restériliser
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou contaminé
LOT	Numéro de lot
	Date de fabrication
	À utiliser avant date de péremption
STERILE EO	Stérilisation par oxyde d'éthylène
	Système de barrière stérile simple
EC REP	Représentant européen autorisé
	Fabricant
	Apyrogène
	Sans dehp
	Sans latex
	Limites de température
	Conserver à l'abri de la lumière du soleil
	Craint l'humidité
MD	Dispositif Médical
	Entité distribuant les dispositifs médicaux dans l'UE
	Marquage CE, produit conforme aux exigences essentielles de la Directive Européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

Rev. 03-21/08

Note : IFU will be put inside the duplex box

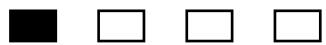Doc. No. Peters Surgical	Date : 08-11-19	Design by	Checked by	Approved by
IFU Design for Rectal Catheter Back Side	Size : 180x130mm P. Area :			
Color Break 	Specifications : 1.	Designer	QA Person	QA Incharge
Black	2.	Issue No. 04	Scale : 1:1	Sheet 1 of 1
Rev.	Amendment		Remarks	Date of Amdt.
1.	Updated the cautions and form of CE symbol			02-12-19
2.	Updated new CE 0123			21-05-20
3.	Added Peter's new logo & address, MD symbol & DEHP Free			27-08-21
4.				